

MAGINON



Bedienungsanleitung

MMP-1

Mini Massage Pistole



MAGINON

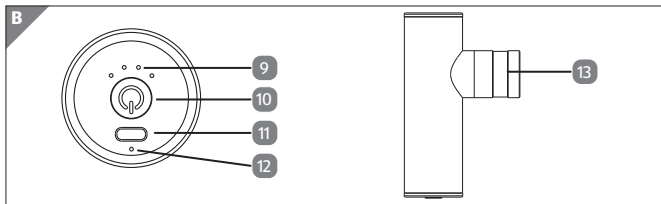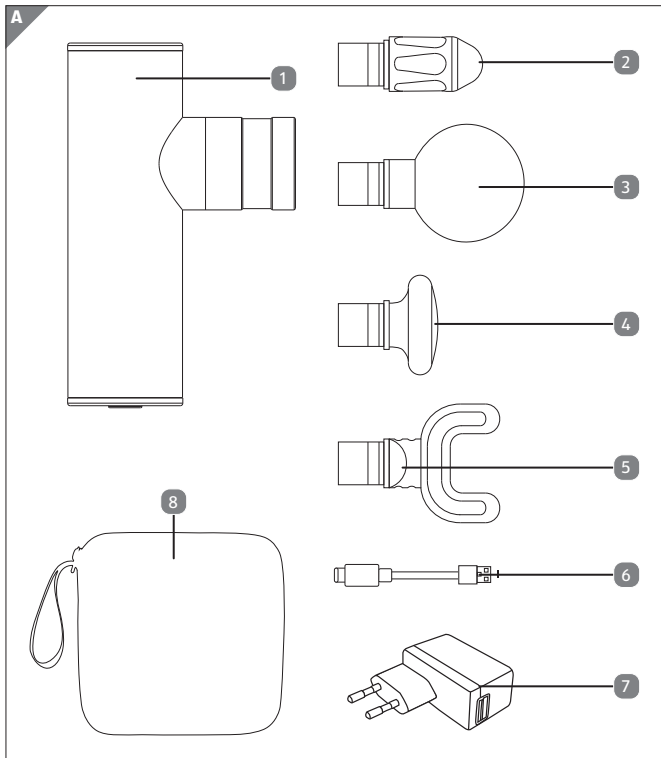

Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Mini Massage Pistole
- 2 Bullet-Aufsatz
- 3 Kugel-Aufsatz
- 4 Flach-Aufsatz
- 5 U-förmiger Aufsatz
- 6 USB C-Kabel
- 7 USB-Netzadapter
- 8 Transporttasche
- 9 Intensität Indikator
- 10 An/Ausschalter
- 11 USB C-Anschluss
- 12 Ladestand Indikator
- 13 Aufnahmearm für Massageaufsatz

Inhaltsverzeichnis

Übersicht	3
Lieferumfang/Geräteteile	4
Vorwort	6
Allgemeines	7
Anleitung lesen und aufbewahren.....	7
Zeichenerklärung.....	8
Sicherheit	10
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	10
Sicherheitshinweise.....	10
Inbetriebnahme	16
Grundreinigung.....	16
Laden der Mini Massage Pistole	16
Einsatz der Massage Pistole.....	17
LED-Anzeigen.....	18
Bedienung der Mini Massage Pistole	19
Verletzungsgefahr!	19
Massageaufsätze	21
Lagerung	23
Aufbewahrung	23
Entsorgung	26
Verpackung entsorgen	26
Altgerät entsorgen.....	26

Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Kauf eines qualitativ
hochwertigen MAGINON Produktes.

Sie haben sich für eine moderne Mini Massage Pistole mit
guter technischer Ausstattung und entsprechendem Zube-
hör entschieden, das sich besonders einfach bedienen lässt.

Auf diese Mini Massage Pistole haben Sie drei Jahre Garantie.
Falls die Mini Massage Pistole einmal defekt sein sollte, benö-
tigen Sie die beigefügte Garantiekarte und Ihren Kassenbon.
Bewahren Sie diese zusammen mit der Mini Massage Pistole
sorgfältig auf.



Informationen über den Erwerb von zusätzlichen
Ersatzteilen und Zubehör finden Sie auf
<https://shop.maginon.com/de>

Impressum

Herausgeber:

supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH

Denisstr. 28 a

67663 Kaiserslautern

Deutschland

Allgemeines

Anleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zur Maginon MMP-1 Mini Massage Pistole. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung. Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird die Mini Massage Pistole im Folgenden nur „Massage Pistole“ genannt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Massage Pistole einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden an der Massage Pistole führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Massage Pistole an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.

 **WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „EU-Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Der Hersteller dieses Produktes hat die gesetzlichen Abgaben für die Altstoffverwertung vorab entrichtet. Er ist daher von der gesetzlichen Verpflichtung befreit, Verpackungen kostenlos zurückzunehmen.



Geräte mit diesem Zeichen haben eine zusätzliche oder verstärkte Isolierung und entsprechen der Schutzklasse II.



Das Netzgerät durch nur in Innenräumen verwendet werden.



Geprüfte Sicherheit: Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Das Netzgerät ist mit einem kurzschlussicheren Sicherheitstransformator ausgestattet.

IP20

Das Netzteil ist nach Schutzart IP 20 gegen Fremdkörper mit einem Durchmesser von $> 12,5$ mm geschützt.



Die internationale Effizienzmarke zeigt an, dass die Netzversorgung die Anforderungen der Stufe VI erfüllt.



Dieses Symbol auf dem Netzgerät bedeutet, dass es sich um ein Schaltnetzteil handelt.



Dieses Symbol auf dem Netzgerät zeigt die Polarität des USB-Anschlusses an.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Diese Massage Pistole dient ausschließlich zur Massage und ist nur für den Privatgebrauch konzipiert und für die gewerbliche Nutzung ungeeignet.

Verwenden Sie die Massage Pistole nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Massage Pistole ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

 **WARNUNG!**

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation, zu hohe Netzspannung und fehlerhafter Umgang mit einem elektrischen Gerät können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Das Gerät, sowie alle elektronischen Zubehörteile dürfen nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Benutzen Sie das Netzgerät daher auch nicht in der Nähe von Feuchtquellen, wie z. B. einem Waschbecken, einer Badewanne oder einer Dusche.
- Der Umgang mit Flüssigkeiten in Verbindung mit Elektrogeräten erfordert höchste Aufmerksamkeit. Eine häufige Unfallursache im Haushalt ist Unaufmerksamkeit bei

Routinevorgängen. Achten Sie darauf, dass beim Anschließen bzw. Abziehen des Netzsteckers oder bei der Bedienung des Geräts Ihre Hände stets trocken sind.

- Kabel und Stecker des Netzgerätes dürfen nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Betreiben Sie das Netzgerät nicht im Freien und setzen Sie es nie Witterungseinflüssen wie Schnee oder Frost aus.
- Schließen Sie das Netzgerät an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose an, deren Spannung den technischen Daten entspricht.
- Bei Verwendung eines Zwischensteckers oder Verlängerungskabels müssen diese den gültigen Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Die angegebene maximale Stromstärke darf nicht überschritten werden.
- Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall schnell den Netzstecker ziehen können.
- Benutzen Sie die Massage Pistole nicht wenn Massage Pistole, Stromkabel oder Netzstecker beschädigt sind, oder die Massage Pistole heruntergefallen ist.
- Wickeln Sie das Stromkabel vor jedem Gebrauch vollständig ab. Achten Sie dabei darauf, dass das Stromkabel nicht geklemmt, gequetscht oder durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände beschädigt wird.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose wenn Sie das Netzgerät nicht benutzen, nach dem Ladevorgang, bevor Sie das Gerät reinigen oder wegstellen, wenn während des Betriebes offensichtlich eine Störung auftritt und bei Gewitter. Ziehen Sie dabei immer am Netzstecker, nicht am Stromkabel.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät oder dem Zubehör vor. Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Beachten Sie auch die beiliegenden Garantiebedingungen.

- Falls Massage Pistole, Stromkabel oder Stecker beschädigt sind, müssen Sie diese durch den Hersteller oder eine Fachwerkstatt reparieren lassen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht austauschbar sind.
- Im Falle von elektrostatischer Entladung kann es zu Fehlfunktionen des Gerätes kommen. In diesem Fall muss das Gerät durch den Benutzer neugestartet werden, um sich zu erholen.

WARNUNG!

- Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur die abnehmbare Versorgungseinheit, die mit diesem Gerät geliefert wird.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Das Gerät darf nicht an eine Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirkssystem, wie z.B. einen Dämmerungsschalter oder eine Funksteckdose angeschlossen werden.

WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen,

sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als 3 Jahre vom Gerät fern, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät nicht regulieren, das Gerät nicht reinigen und/oder nicht die Wartung durchführen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Bei Verschlucken besteht Erstickengefahr. Achten Sie auch darauf, dass der Verpackungsbeutel nicht über den Kopf gestülpt wird.

 **WARNUNG!**

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Massage Pistole kann zu Verletzungen führen.

- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht zur Stolperfalle wird.
- Kontakt von ausgelaufener Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt mit Batterieflüssigkeit die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.

 **WARNUNG!**

Verbrennungs-, Brand- und Explosionsgefahr!

Während des Gebrauchs wird die Massage Pistole sehr warm.

- Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Gasen, Flüssigkeiten oder sonstigen brennbaren Materialien. Auch in explosionsgefährdeten Räumen dürfen Sie die Massage Pistole nicht verwenden.
- Um Brandgefahr auszuschließen, ziehen Sie bei längerer Abwesenheit, z. B. Urlaub, den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stellen Sie die Massage Pistole immer auf einen festen, ebenen und wärmeunempfindlichen Untergrund. Achten Sie dabei auf einen ausreichend großen Abstand zu starken Wärmequellen wie Heizplatten, Heizungsrohren u. ä.
- Vermeiden Sie einen Hitzestau und stellen Sie das Gerät

so auf, dass die beim Gebrauch auftretende Wärme des Gehäuses rundum gut abziehen kann.

- Legen Sie keine Gegenstände wie z. B. Tücher oder Zeitschriften auf das Netzgerät oder die gerade ladende Massage Pistole. Es besteht Brandgefahr!
- Eine Überladung des Akkus ist ausgeschlossen. Ist der Akku aufgeladen, trennen Sie die Massage Pistole vom Netzgerät und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Der Akku der Massage Pistole darf nicht außerhalb des Gerätes geladen, mit anderen Mitteln reaktiviert, auseinander genommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Massage Pistole kann zu Beschädigungen des Gerätes führen.

- Achten Sie beim Ladevorgang und bei der Benutzung auf einen ausreichend großen Abstand zu starken Wärmequellen wie Heizplatten, Heizungsrohren u. ä.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, Scheuermittel, harte oder kratzende Schwämme, Stahlwolle o. ä.

Inbetriebnahme

Grundreinigung

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und alle Plastikfolien.
- Reinigen Sie alle Teile des Produkts vor dem ersten Gebrauch, wie im Kapitel „Reinigung“ beschrieben.

Laden der Mini Massage Pistole

- Laden Sie das Produkt vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal verwenden.
- Laden Sie das Produkt auf, wenn die Ladestand Anzeige **12** während des Gebrauchs rot blinkt.



Ein vollständiger Ladezyklus dauert ca. 5 Stunden. Trennen Sie das Ladekabel, sobald es vollständig aufgeladen wurde.

- Verbinden Sie das USB C-Kabel **7** mit dem USB C-Anschluss **11** auf der Unterseite der Massage Pistole **1** und dem USB-Netzadapter. Stecken Sie den USB-Netzadapter **6** in eine leicht zugängliche Steckdose. Der Ladevorgang beginnt sofort. Der Ladestand-Indikator **12** beginnt rot zu leuchten.
- Der Ladestand-Indikator **12** leuchtet konstant grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Ziehen Sie den USB-Netzadapter aus der Steckdose und ziehen Sie den Ladestecker vom Produkt ab. Das Produkt ist jetzt einsatzbereit.

Einsatz der Massage Pistole

Die Massage Pistole kann bei verschiedenen Beschwerden oder auch einfach nur zum Entspannen eingesetzt werden.

- Sie lindert Schmerzen und Krämpfe, die durch Muskelprellungen, Verstauchungen und Zerrungen verursacht werden.
- Sie hilft Verspannungen der Muskeln aufzulösen.
- Sie reduziert Muskelentzündungen und Milchsäureansammlungen in den Muskeln.
- Sie kann Bindegewebe stärken und verspannte Faszien lösen
- Sie trägt zur Verbesserung der Gelenkflexibilität bei
- Sie hilft Muskelermüdungen zu lösen.

WARNUNG!

Nicht eingesetzt werden darf die Massage Pistole

- während der Schwangerschaft oder Stillzeit.
- bei einer Herzerkrankung, oder von Personen mit einem Herzschrittmacher.
- bei Diabetes oder anderen Sinnesstörungen.
- wenn die Person an Krampfanfällen/Epilepsie oder Krebstumoren leidet.
- bei Phlebitis und/oder Thrombose.
- bei Gelenkfunktionsstörungen, Gelenkentzündungen oder Gelenkverletzungen.
- bei schwachen Knochen, Osteoporose, hohem Fieber oder einer abnormalen oder gekrümmten Wirbelsäule.
- wenn Stifte/Schrauben/künstliche Gelenke oder andere medizinische Geräte in den Körper implantiert wurden.
- an Schienbein, Fuß- und Handrücken.

LED-Anzeigen

Die Massage Pistole **1** besitzt 2 LED Anzeigen, den Intensität Indikator **9** und den Ladestand Indikator **12**. In den folgenden Tabellen werden die jeweiligen Anzeigen erläutert.

Intensität Indikator	
Alle LEDs aus	Das Gerät ist ausgeschaltet
Eine LED an	Intensität Stufe 1 aktiviert
Zwei LEDs an	Intensität Stufe 2 aktiviert
Drei LEDs an	Intensität Stufe 3 aktiviert
Vier LEDs an	Intensität Stufe 4 aktiviert

Ladestand Indikator	
LED leuchtet konstant rot	Gerät wird geladen
LED leuchtet konstant grün	Gerät ist voll geladen
LED blinkt alle 5 Sekunden 3 x grün	Akkustand über 70%
LED blinkt alle 5 Sekunden 2 x grün	Akkustand 30 -70%
LED blinkt alle 5 Sekunden 1 x grün	Akkustand 10 - 29%
LED blinkt rot	Akkustand unter 10%

Bedienung der Mini Massage Pistole

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Massage Pistole **1** kann zu Verletzungen führen.

- **Warnung:** Betreiben Sie das Produkt aus Sicherheitsgründen nur schnurlos.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei offenen Wunden, Schnitten, Sonnenbrand oder Blasen.
- Wechseln Sie den Massage Aufsatz nur, wenn die Massage Pistole ausgeschaltet ist.



- Nach 10 Minuten Massagebetrieb schaltet die Massage Pistole **1** automatisch ab.
- Möchten Sie die Massage fortsetzen, starten Sie die Massage Pistole **1** erneut.

1. Wählen Sie den gewünschten Massage-Aufsatz und installieren Sie diesen auf dem Aufnahmearm für die Massageaufsätze **13**. Zum Installieren schieben Sie einfach den gewählten Massage-Aufsatz bis zum Anschlag des erhöhten Ringes in die Öffnung des Aufnahmearm für den Massageaufsatz **13**.
2. Schalten Sie die Massage Pistole **1** durch Drücken des An/Ausschalter **10** ein. Drücken Sie den Schalter für 3 Sekunden, bis alle 4 LED Leuchten des Intensität Indikator **9** blau leuchten. Der Massage-Aufsatz beginnt zu vibrieren.

3. Wählen Sie die gewünschte Massage-Intensität, indem Sie den An/Ausschalter **10** kurz drücken. Nach dem Einschalten befinden sich die Massage Pistole **1** in der Intensität Stufe 1 und eine blaue LED des Intensität Indikators **1** leuchtet. Durch jeweils einen kurz Druck auf den An/Ausschalter **10** können Sie die Intensität Stufen 2, 3 und 4 aktivieren. Es wird jeweils eine weitere LED zugeschaltet. Leuchten alle 4 LEDs haben Sie die Intensität Stufe 4 erreicht. Bei einem weiteren Druck auf den An/Ausschalter **10** befinden Sie sich wieder in der Intensität Stufe 1.
4. Ein Massagevorgang ist aus Sicherheitsgründen auf 10 Minuten begrenzt. Die Massage Pistole schaltet nach 10 Minuten automatisch ab.
5. Sollten Sie die Massage fortsetzen wollen, schalten Sie die Massage Pistole **1** erneut ein und wählen Sie die gewünschte Intensität Stufe.
6. Möchten Sie die Massage Pistole manuell abschalten, drücken Sie den An/Ausschalter **10** so lange, bis alle 4 LED Leuchten des Intensität Indikator erloschen sind.

Massageaufsätze

	Die Massage Pistole wird mit 4 verschiedenen Massageaufsätzen ausgeliefert. Jeder Aufsatz eignet sich für unterschiedliche Muskeln und Körperregionen.
	Bullet-Aufsatz Geeignet zum Massieren tiefer Gewebe wie Meridiane, Handflächen, Fußsohlen usw.
	Kugel-Aufsatz Geeignet zum Massieren der Muskulatur wie z.B. Arme, Rücken, Gesäß, Oberschenkel, Waden usw.
	Flach-Aufsatz Geeignet zum Entspannen und Formen verschiedener Muskelpartien.
	U-förmiger-Aufsatz Geeignet zur Massage von Nacken, Wirbelsäule und Achillessehne

Technische Daten

Modell:	MMP-1
Geschwindigkeitsstufen:	4 (1800 U/min - 3200 U/min)
Eingang:	5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Akku:	11,1 V $\overline{\text{---}}$, 2000 mAh / 22,2 Wh Lithium-Ionen-Akku
Ladedauer:	5 Stunden
Betriebsdauer:	3,5 Stunden (bei höchster Intensität Stufe)
Netzadapter:	Modell: CW0502000EU Hersteller: Shenzhen Cenwell Technology Co., Ltd Eingang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,4 A max. Ausgang: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A 10,0 W Schutzklasse II IP 20
Gewicht:	450 g
Maße:	140 x 48 x 90 mm



Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH, dass dieses Gerät „MMP-1“ den folgenden Richtlinien entspricht:

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie

2014/30/EU EMV-Richtlinie

2009/125/EG Öko-Design-Richtlinie

2011/65/EU RoHS-Richtlinie

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH
Denisstraße 28 a
67663 Kaiserslautern
Deutschland

Lagerung

Alle Teile müssen vor der Lagerung vollständig trocken sein.

- Lagern Sie das Produkt immer in der Aufbewahrungstasche **8** an einem trockenen Ort.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Lagern Sie das Produkt so, dass es für Kinder nicht zugänglich ist.

Aufbewahrung

Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, vom Netz trennen und an einem sauberen und trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Reinigung

WARNUNG!

Verbrennungsgefahr!

Das Produkt wird während des Betriebs heiß und kann Verbrennungen verursachen.

- Lassen Sie das Produkt vor jeder Reinigung vollständig abkühlen.

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

Wasser oder andere Flüssigkeiten, die in das Gehäuse eingedrungen sind, können einen Kurzschluss verursachen.

- Stellen Sie sicher, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse eindringen.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr

Eine unsachgemäße Handhabung des Produkts kann zu Schäden am Produkt führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten oder scharfe oder metallische Reinigungsutensilien wie Messer, harte Schaber und dergleichen. Sie könnten die Oberflächen beschädigen.

- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass die Massage Pistole ausgeschaltet ist und das Ladekabel entfernt wurde.
- Die Massage Pistole muss vollständig abgekühlt sein.
- Wischen Sie das Gehäuse der Massage Pistole mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch ab. Nutzen Sie hierzu gegebenenfalls Desinfektionstücher.
- Lassen Sie die Massage Pistole vor einer weiteren Nutzung oder Aufbewahrung vollständig trocken werden.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!

Sollte die Massage Pistole einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B.

bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem nebenstehendem Symbol gekennzeichnet.



Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

MAGINON

MAGINON

supra

Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH

Denisstr. 28 a

67663 Kaiserslautern

Deutschland